

 **TOPRO**

Premiumsessel



CH

TOPRO RUHE- UND AUFSTEHSESSEL

VOLLENDUNG IN KOMFORT UND DESIGN

Bequem sitzen, komfortabel ruhen, entspannt fernsehen – das bieten Ihnen die hochwertigen Ruhe- und Aufstehsessel von TOPRO.

Die eingebaute Aufstieghilfe unterstützt Ihre Mobilität in genau dem Mass, wie Sie es wünschen und hebt Sie sicher in den Stand oder lässt Sie sanft in die gewünschte Sitz- oder Liegeposition absinken.

Die Sessel bieten angenehme Unterstützung und sicheren Halt für Ihren Rücken und Ihre Beine durch eine ergonomisch geformte Rücken- und Sitzfläche.

Mit der Fernbedienung bestimmen Sie selbst, wie schnell Sie die Fusstütze und die Rückenlehne heben oder senken, und wie viel Hilfe Sie beim Aufstehen oder Setzen in Anspruch nehmen wollen. Serienmässig ist die Fernbedienung bei allen Sesseln auf der rechten Seite angebracht, sie kann mit beiden Händen bedient werden.

Die Deutsche Gesellschaft für Gerontechnik® (GGT) hat die TOPRO Aufstehsessel in individuellen Benutzertests geprüft, für gut befunden und mit dem GGT-Siegel ausgezeichnet. Bei ihren Tests lässt die GGT Produkte von

Senioren in Alltagssituationen sehr praxisnah auf ihre Benutzerfreundlichkeit testen.

Die TOPRO Sessel sind in modernen Farben, schönen Bezugstoffen sowie mit tollen Features für noch mehr Komfort, Sicherheit und Ordnung ausgestattet.

Intuitiv, komfortabel und sicher mit der TOPRO Farbskala:

-  Sitzen
-  Ruhen
-  Aufstehen
-  Fusstütze separat bedienen
-  Rückenlehne separat bedienen
-  Sitzhöhe einstellen







CORTINA

KOMFORT UND STIL

Ein Sessel der nächsten Generation ist der funktionalste Sessel von TOPRO, der Cortina. Er wirkt sehr edel und modern und bietet seinem Nutzer Behaglichkeit, Komfort und Sicherheit.

- Eine **eingebaute Sitzheizung** für das Gesäss und den Lendenbereich sorgt für Behaglichkeit an kalten Tagen. Insbesondere Personen, die leicht frieren, profitieren davon.
- Drei Motoren bieten höchsten Komfort und umfangreiche Verstellmöglichkeiten für Rückenlehne und Fusstütze, die sich auch getrennt voneinander bewegen lassen. So findet jeder seine persönliche Lieblingsposition im Sitzen, Ruhen und Liegen sowie beim Fernsehen. Zudem lässt sich der Sessel **um 180° drehen**.
- Das Kopfteil des Sessels kann einfach per Hand verstellt werden, das ist u. a. für Personen mit Rundrücken besonders angenehm.
- Die eingebaute Aufstehhilfe unterstützt sanft und sicher beim Aufstehen und Hinsetzen.
- Zur Vorbeugung von Druckgeschwüren trägt die „Schwerelos-Funktion“ bei. Diese sogenannte „**Sitzkantelung**“ entlastet das Gesäss wirkungsvoll vom Sitzdruck.
- In den seitlich angebrachten Taschen können neben Zeitschriften und Büchern auch das Handy und die Fernbedienung untergebracht werden.
- Auf der linken Seite befinden sich auch **zwei USB-Steckplätze**, die Handy, Tablet oder Leselampe mit Strom versorgen.

Erhältliche Farben:

-  Graphite Microsamt
-  Mocca* Microfaser
-  Titan Kunstleder
-  Black Kunstleder

* solange der Vorrat reicht



Aufrecht sitzen
Bringt den Sessel vom Liegen oder Hinsetzen aus dem Stand in eine aufrechte Sitzposition.

Aufstehen und Absetzen
In aller Ruhe und in Ihrer gewünschten Geschwindigkeit steuern Sie Ihr Aufstehen und können sich ebenso gemütlich hineinsetzen.

Ruhen
Führt den Sessel in die gewünschte Liegeposition.

Richtig positionieren
Individuelle Einstellung der Fusstützen.

„Schwerelos“-Funktion
Stellen Sie die Sitzkantelung nach Ihren Bedürfnissen ein und entlasten Sie sich.



Sitzheizung
Schalten Sie die Sitzheizung im Lenden- und Sitzbereich ein und aus.

Rückenlehne
Stellen Sie die Rückenlehne individuell ein.



Details und Funktionen



Sichere Unterstützung beim Aufstehen und Hinsetzen.

Technische Daten

Belastbarkeit	150 kg
Sesselbreite	80 cm
Sesselhöhe	122 cm
Sesseltiefe in Liegeposition	165 cm
Sitzhöhe	50 cm
Sitzbreite	52 cm
Sitztiefe	49,5 cm
Höhe Rückenlehne	80 cm



Entspannung in der bequemen Ruheposition.



Die „Schwereelos-Funktion“ – eine Wohltat für Kreislauf und Venen.



Schnelle Ausrichtung zum Zentrum des Geschehens durch 180°-Drehung.



Das Kopfteil der Lehne kann einfach verstellt werden.



An den USB-Steckplätzen können Handy, Tablet und Leselampe geladen werden.



Die Fusstütze kann unabhängig von der Rückenlehne eingestellt werden.



VERONA

AUSSERGEWÖHNLICH KOMFORTABEL



Der moderne Aufstehsessel Verona ist unser Bestseller mit viel Komfort.

Er wurde mit folgenden Eigenschaften versehen:

- Die **grosse Seitentasche** sorgt für Ordnung – Zeitschriften, Bücher oder Ihre Fernbedienung sind immer in Reichweite. Eine **integrierte kleine Tasche** ist für das Handy oder den Notrufknopf vorgesehen. So sind sie bei Bedarf schnell zur Hand.
- Die **Rückenlehne** ist ergonomisch geformt und bietet eine komfortable Lendenwirbelunterstützung für gesünderes Sitzen.
- Für mehr Komfort beim Sitzen und Aufstehen sorgt die **Sitzfederung** unter dem anschmiegsamen Polster.
- Die **optimierte Greifzone** in den Armlehnen gibt besseren Halt beim Aufstehen und Hinsetzen.
- **Grosse Parkettrollen** erleichtern das Verschieben des Sessels.

Für viel Komfort beim Aufstehen und Hinsetzen sorgen **zwei Motoren** im Innern des Sessels. Auch die Rückenlehne und die Fussstütze werden damit verstellt. Dafür gibt es eine Fernbedienung, die rechts und links montiert werden kann und mit grossen Knöpfen und der TOPRO Farbskala zur einfachen Bedienung versehen ist.

Erhältliche Farben:

- Crystal Microfaser
- Sahara Microfaser
- Titan Microfaser
- Graphite Microsamt
- Marine Kunstleder
- Black Kunstleder



Aufstehen und Absetzen

In aller Ruhe und in Ihrer gewünschten Geschwindigkeit steuern Sie Ihr Aufstehen und Hinsetzen.

Liegen und Ruhen

Geniessen Sie das Nickerchen zwischendurch in vollständig ausgestreckter Position.

Technische Daten

Belastbarkeit	150 kg
Sesselbreite	77 cm
Sesselhöhe	107,5 cm
Sesseltiefe in Liegeposition	179 cm
Sitzhöhe	48 cm
Sitzbreite	52 cm
Sitztiefe	52 cm
Höhe Rückenlehne	68 cm

MODENA

EINFACH MODERN



Modern und elegant wirkt der Aufstehsessel Modena, der mit einem Elektromotor für sicheres Aufstehen und bequeme Sitz- und Ruhepositionen sorgt.

Modena wurde weiterentwickelt und mit folgenden Eigenschaften versehen:

- Eine **grosse Seitentasche** für Zeitungen, Bücher oder die Fernbedienung sorgt für Ordnung. Sehr praktisch ist die **integrierte kleine Tasche** für das Handy oder den Notrufknopf.
- Die **ergonomisch geformte Rückenlehne** mit der speziellen Lendenwirbelunterstützung macht das Sitzen zum gesunden Genuss.
- Noch mehr Sitzkomfort erhält der Sessel durch eine **spezielle Unterfederung** unter dem anschmiegsamen Polster.
- Besseren Halt beim Aufstehen und Hinsetzen gibt die **optimierte Greifzone** in den Armlehnen.

- Der Sessel wird mit einer intuitiv zu bedienenden Fernbedienung gesteuert, die mit einer **Kindersicherung** versehen ist – so wird verhindert, dass sich spielende Kinder am Sessel verletzen können.

Erhältliche Farben:

- Crystal Duet
Microfaser/Kunstleder
- Titan Duet
Microfaser/Kunstleder
- Sahara
Microfaser
- Graphite
Microsamt
- Marine
Kunstleder
- Black
Kunstleder

Kinder-Sicherungspin
Schützt vor Verletzungen. Bei nicht gewollter Nutzung den Pin herausziehen.



Aufstehen und Absetzen

In aller Ruhe und in Ihrer gewünschten Geschwindigkeit steuern Sie Ihr Aufstehen und können sich ebenso gemächlich hineinsetzen.

Technische Daten

Belastbarkeit	150 kg
Sesselbreite	83 cm
Sesselhöhe	105 cm
Sesseltiefe in Liegeposition	162 cm
Sitzhöhe	43,5 cm
Sitzbreite	51 cm
Sitztiefe	52 cm
Höhe Rückenlehne	70 cm

Ruhen

Diese Komfortfunktion hebt Ihre Beine bequem nach oben und bringt Sie in eine ideale Lage zum Lesen oder Fernsehen.



SIENA

EINFACH KLASSISCH



Der Ohrensessel Siena verbindet Gemütlichkeit mit viel Komfort und bietet mithilfe seines Elektromotors sichere Unterstützung beim Aufstehen und Hinsetzen sowie bequeme Ruhe- und Sitzpositionen.

Nach einer kompletten Überarbeitung hat Siena weitere Annehmlichkeiten zu bieten:

- Für Ordnung sorgt die **grosse Seitentasche**, in der Zeitungen und Bücher oder die Fernbedienung untergebracht werden können. Integriert wurde hier eine **kleine Zusatztasche** für das Handy oder den Notrufknopf, die so immer schnell erreichbar sind.
- Auch der Sitz ist noch komfortabler durch eine **spezielle Unterfederung** unter dem anschmiegsamen Polster.
- Mehr Sicherheit beim Aufstehen und Hinsetzen gibt die **integrierte Polsterverstärkung** in den Armlehnen, die Greifzone wird dadurch verbessert.
- Ein Kindersicherungs-Pin verhindert ungewollte Nutzung und beugt Verletzungen vor.
- Bequemes und gesünderes Sitzen ermöglicht die **ergonomisch geformte Rückenlehne** mit Lendenwirbelunterstützung.
- Eine intuitiv verständliche Fernsteuerung fährt den Sessel in die gewünschte Position.

Erhältliche Farben:

- Crystal Duet
Microfaser/Kunstleder
- Titan Duet
Microfaser/Kunstleder
- Sahara
Microfaser
- Graphite
Microsamt
- Marine
Kunstleder
- Black
Kunstleder



Kinder-Sicherungspin
Schützt vor Verletzungen. Bei nicht gewollter Nutzung den Pin herausziehen.



Aufstehen und Absetzen
In aller Ruhe und in Ihrer gewünschten Geschwindigkeit steuern Sie Ihr Aufstehen und können sich ebenso gemütlich hineinsetzen.

Ruhen
Diese Komfortfunktion hebt Ihre Beine bequem nach oben und bringt Sie in eine ideale Lage zum Lesen oder Fernsehen.

Technische Daten

Belastbarkeit	150 kg
Sesselbreite	80 cm
Sesselhöhe	103 cm
Sesseltiefe in Liegeposition	165 cm
Sitzhöhe	45,5 cm
Sitzbreite	51 cm
Sitztiefe	54 cm
Höhe Rückenlehne	67 cm

BOLOGNA

KOMFORT UND FUNKTION

Der multifunktionale Pflegesessel Bologna steht für Komfort und modernes Design.

- Entwickelt für die Nutzung im Pflegeheim, im Betreuten Wohnen und für pflegebedürftige Personen in häuslicher Umgebung.
- Ideal geeignet für den **einfachen und sicheren Transfer** im Sitzen oder Liegen, durch herabsenkbare Armlehnen.
- **Sesselhöhe um 20 cm verstellbar** und damit gut für die Pflege oder das Essen am Tisch geeignet.
- **Vier Motoren** für höchsten Komfort; vom Sitzen bis zum Aufstehen und Herz-Waage-Position.
- Die für gute Kraftübertragung **ideal positionierten Schiebegriffe** an der Rückenlehne erleichtern das Verschieben des Sessels mit Person innerhalb der Räumlichkeiten.
- Beide Hinterräder sind mit Bremsen ausgestattet.
- **Hochwertiger Kunstlederbezug**, der sich leicht reinigen lässt und zudem feuerresistent ist.
- Die Fernbedienung ist rechts und links montierbar.

Für den zusätzlichen Komfort sind optional erhältlich:

- Batterien für grössere Mobilität im Haus.
- Tragbarer Funkalarm.
- Einstellkissen zum Anpassen der Sitztiefe oder -höhe und Lumbalkissen in Sesselfarbe.

Erhältliche Farben:

- Crystal Kunstleder
- Titan Kunstleder
- Black Kunstleder



Tastensperre
Ermöglicht eine individuelle Freischaltung/Sperrung der einzelnen Tasten.

Alarm
Löst ein akustisches Warnsignal im Raum aus. Optional auch mit Funkalarm.

Sicherungspin
Schützt vor Verletzungen; bei nicht gewollter Nutzung den Pin herausziehen.

Transportfunktion
Die Fussstütze wird ausgefahren, um einen optimalen Transport zu ermöglichen.

Höhenverstellung
Passt den Sessel an die jeweilige Höhe von Betten und Stühlen an.

Aufsteh-Alarm
Akustisches Warnsignal, ertönt sobald der Nutzer aufsteht. Optional mit Funkalarm.

Ruhen
Diese Komfortfunktion hebt Ihre Beine bequem nach oben und bringt Sie in eine ideale Lage zum Lesen oder Fernsehen.

Aufstehen und Absetzen
In aller Ruhe und in Ihrer gewünschten Geschwindigkeit steuern Sie Ihr Aufstehen und können sich ebenso gemütlich hineinsetzen.

Herz-Waage-Position
Dient der Entlastung der Venen.



Details und Funktionen



Die Höhenverstellung um bis zu 20 cm bietet viele Möglichkeiten beim Transfer.

Technische Daten

Belastbarkeit	150 kg
Sesselbreite	78,1 cm
Sesselhöhe	118 cm
Sesseltiefe in Liegeposition	179 cm
Sitzhöhe	51-71 cm
Sitzbreite	53 cm
Sitztiefe	54,6 cm
Höhe Rückenlehne	77 cm



Die Kopflehne ist vom Pfleger separat und leicht anpassbar.



Einklettbares Lumbalkissen, variabel in der Höhe.



Die Armlehnen sind für den Transfer absenkbar.



Armlehnengriffe zur Erleichterung beim Aufstehen.



Sitzhöhe und Sitztiefe sind durch das einlegbare Kissen aus Memoryschaum einfach anpassbar.



Bremsbare Räder hinten.

Sesselzubehör



Armlehnenbezug Microfaser Verona (Paar)

Crystal Art.-Nr. 0037-CY
Titan Art.-Nr. 0037-TI
Sahara Art.-Nr. 0037-SH

Microsamt
Graphite Art.-Nr. 0037-GR



Armlehnenbezug Kunstleder Modena (Paar)


Marine Art.-Nr. 0038-MA
Titan Art.-Nr. 0038-TI
Black Art.-Nr. 0038-BL



Kopfkissen ComfortPlus Microfaser

Crystal Art.-Nr. 0040-CY
Titan Art.-Nr. 0040-TI
Sahara Art.-Nr. 0040-SH

Microsamt
Graphite Art.-Nr. 0040-GR

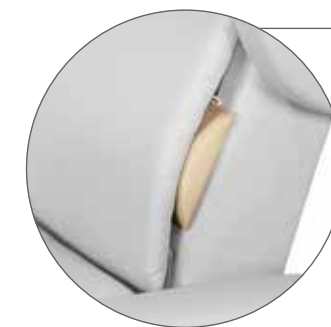

Lumbalkissen Kunstleder Bologna

Crystal Art.-Nr. 0043-CY
Titan Art.-Nr. 0043-TI
Black Art.-Nr. 0043-BL



Armlehnenbezug Kunstleder Verona (Paar)

Marine Art.-Nr. 0037-MA
Black Art.-Nr. 0037-BL



Lumbalkissen ComfortPlus Microfaser


Crystal Art.-Nr. 0039-CY
Titan Art.-Nr. 0039-TI
Sahara Art.-Nr. 0039-SH

Microsamt
Graphite Art.-Nr. 0039-GR



Kopfkissen ComfortPlus Kunstleder

Marine Art.-Nr. 0040-MA
Black Art.-Nr. 0040-BL

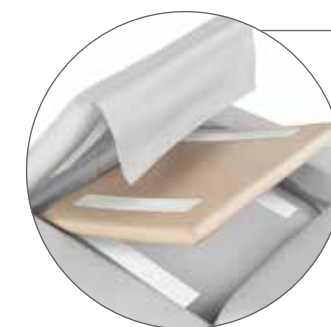

Sitzkissen Kunstleder Bologna abziehbar, zur Anpassung

Crystal Art.-Nr. 0041-CY
Titan Art.-Nr. 0041-TI
Black Art.-Nr. 0041-BL



Armlehnenbezug Microfaser Modena (Paar)

Crystal Art.-Nr. 0038-CY
Sahara Art.-Nr. 0038-SH

Microsamt
Graphite Art.-Nr. 0038-GR



Lumbalkissen ComfortPlus Kunstleder

Marine Art.-Nr. 0039-MA
Black Art.-Nr. 0039-BL



Funkalarm für Bologna

Art.-Nr. HC13015-0042



ComfortPlus ist ein spezieller Schaumstoff, der sich dem Körper anpasst. Er reflektiert auf angenehme Weise die eigene Körperwärme.

Premium Ruhe- und Aufstehsessel

Hersteller:



TOPRO Industri AS
Rambekkvegen 5
2816 Gjøvik
Norwegen

Tel. (+47) 61 13 46 00
info@topromobility.com
www.topromobility.com



TOPRO GmbH
Bahnhofstrasse 26 d
82256 Fürstenfeldbruck

Tel. +49 (0) 8141 88 89 39-0
Fax +49 (0) 8141 88 89 39-22
E-Mail: cs@topro.de
www.topromobility.com



Vertrieb durch:



TOPRO GmbH
Zweigniederlassung Stetten
Im Stetterfeld 2
5608 Stetten

Tel.: +41 (0) 44 940 36 50
Fax: +41 (0) 44 940 36 51
E-Mail: mail@topro.ch
www.topromobility.ch



Für Fachhändler